

ИНСТРУКЦИЯ REVLINE

KIDS RL 050

Электрическая звуковая зубная щетка

7+



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вы стали обладателем высокотехнологичного устройства, которое позволит вашим зубам и деснам быть красивыми и здоровыми. Ощутите новый уровень чистоты уже после первого применения.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед первым применением щетки Revlyne RL 050 Kids внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее.

Для предотвращения электротравм, ожогов, пожаров, нанесения вреда себе и окружающим:

1. Не трогайте влажными руками зарядное устройство, подключенное к электросети.
2. Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в емкость с водой или раковину.
3. Не используйте прибор при неисправности зарядного устройства или повреждении силового кабеля.
4. Используйте только фирменные насадки и аксессуары.
5. Не вставляйте посторонние предметы в гнездо для сменной насадки.
6. Заряжайте прибор вдали от горячих поверхностей.
7. Не включайте щетку в помещении, где ранее использовался кислород или аэрозоли.
8. Перед использованием щетки удалите из полости рта все съемные конструкции.
9. Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на языке.
10. Использование щетки детьми до 12 лет рекомендовано под контролем взрослых.

11. Не следует хранить щетку на зарядной базе, по окончании зарядки снимите щетку с зарядной платформы.

12. Электрическую зубную щетку Revlyne RL 050 Kids не рекомендуется использовать детьми с ограниченными физическими возможностями, психическими нарушениями и отсутствием опыта использования подобного прибора.

13. Небольшое нагревание ручки во время зарядки прибора является нормальным. Но если ручка становится горячей, отключите питание.

14. Время от времени следует очищать контакты адаптера питания, чтобы избежать перегрева прибора и поломок.

15. Храните устройство вдали от прямых солнечных лучей в сухом и хорошо проветриваемом месте при температуре не ниже -7°C и не выше +40°C

16. Утилизация прибора и встроенного аккумулятора должна осуществляться в соответствии с общепринятыми правилами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА

Небольшая кровоточивость и дискомфорт десен в начале использования данного устройства являются нормой. Если кровотечение и дискомфорт сохраняются более одной недели, следует обратиться к стоматологу.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Зарядка осуществляется на базе через провод USB Type-C. Перед зарядкой щетки убедитесь, что она выключена.

Перед тем как установить щетку на зарядную базу, проверьте, сухая ли контактная часть у ее основания. Установите щетку на базу зарядного устройства и убедитесь, что питание подключено.

При зарядке на базе индикатор мигает. Если при зарядке индикатор перестает мигать, значит батарея полностью заряжена.

Если батарея разряжена, то во время использования индикатор батареи мигает в течение нескольких секунд, а затем отключается.

Щетка работает до 30 дней от одного заряда (при двухразовой ежедневной чистке по 2 мин.).

В случае если щетка долго не использовалась, световой индикатор зарядки загорается не сразу.

Если вы не пользовались щеткой 6 месяцев и более, то перед возобновлением использования следует полностью зарядить аккумулятор.

Внимание! Не подзаряжайте устройство между чистками. Производите зарядку аккумулятора тогда, когда уровень заряда становится низким.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

1. Вставьте насадку в рукоятку.
2. Намочите щетину и нанесите небольшое количество зубной пасты.
3. Поместите головку щетки в рот, чтобы избежать разбрызгивания пасты во время начала работы.
4. Один раз нажмите на кнопку управления.

ВЫБОР РЕЖИМА ЧИСТКИ

Выбора режима (активация/деактивация) осуществляется удержанием кнопки в течение 5 секунд, сопровождается трехразовым миганием всех светодиодов.

Электрическая зубная щетка Revyline RL 050 Kids позволяет использовать два режима работы:


- **DAILY CLEAN** – ежедневный уход.
- **SENSITIVE CLEAN** – для чувствительных зубов.

Переключение режимов производится нажатием кнопки управления. Каждое нажатие приводит к последовательной активации нового режима. Включенный световой индикатор соответствует режиму, который используется.


УСТАНОВКА И ЗАМЕНА НАСАДКИ

Установите насадку, надев ее на металлический стержень таким образом, чтобы рабочая поверхность насадки совпадала с лицевой стороной корпуса щетки. Стоматологи рекомендуют менять насадку каждые 3 месяца для сохранения высокой эффективности гигиены полости рта.


ПРОЦЕСС ЧИСТКИ

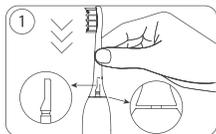


Аккуратно наденьте насадку на посадочное место. Оставьте небольшой зазор между насадкой и корпусом, зазор необходим для того, чтобы щетка могла вибрировать.

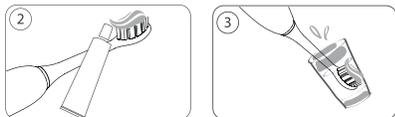

Намочите чистящую головку зубной щетки и нанесенную на нее зубную пасту, прежде чем вы приступите к чистке зубов, это поможет зубной пасте лучше воздействовать на поверхность зубов во время чистки.

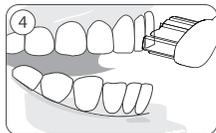


Поднесите насадку щетки к поверхности зубов, расположив параллельно линии десен. Включите щетку. Производите чистку мягко. Не надавливайте слишком сильно, иначе можете травмировать поверхность зубов и десен. Перемещайте чистящую головку медленно, совершая вращательно-возвратные движения.

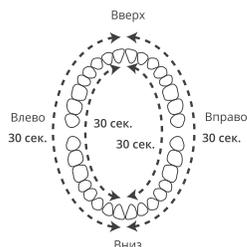

Для обеспечения равномерного очищения разделите полость рта на четыре равных условных зоны и очищайте их поочередно. Встроенный таймер уведомит вас о смене зоны чистки коротким прерыванием колебаний щетины после 30 секунд работы. После четырех 30-секундных интервалов щетка отключится автоматически.

Во время чистки не следует надавливать на чистящую головку слишком энергично.

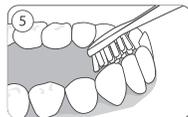

После завершения чистки тщательно прополощите полость рта чистой водой.



УХОД ЗА ЗУБНОЙ ЩЕТКОЙ

Регулярно очищайте зубную щетку Revyline RL 050 Kids. Промойте чистящую головку насадки, чтобы удалить остатки пасты после чистки, и дайте ей высохнуть на воздухе. Не трите щетину, чтобы не деформировать ее. Ополосните рукоятку, чтобы удалить загрязнения после чистки, и высушите мягкой тканью. Не погружайте зубную щетку в воду. Не чистите зубную щетку агрессивным моющим средством и при температуре воды выше + 40°C.

НАСАДКИ В КОМПЛЕКТЕ

В базовой комплектации зубной щетки Revyline RL 050 Kids стандартная сменная насадка.



Внимание! Согласно правилам личной гигиены, совместное использование одной насадки различными пользователями недопустимо.

ГАРАНТИЯ

Гарантия на прибор – 2 года.

Гарантированное техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслуживание щетки осуществляется за счет покупателя.

Гарантия не распространяется:

- На расходные материалы и комплектующие.
- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие:
 - применения их не по назначению;
 - неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждениям; модификации, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом);
 - нарушения правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки, указанных в руководстве по эксплуатации.
- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к неправильному источнику питания.
- На товары, эксплуатировавшиеся с неустранимыми недостатками.
- На неисправности, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как действия третьих лиц, явления природы и стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, попадание внутрь посторонних предметов и жидкостей.
- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потери и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и в результате естественного износа.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Основной блок щетки.
- Сменная насадка – 1 шт.
- База с контактной зарядкой.
- Провод USB Type-C.
- Стикерпак – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: **RL 050 Kids**
Предназначена для эффективной чистки зубов.

- Материал корпуса: ABS-пластик
- Щетина: DuPont
- Диаметр щетинок: 0,152 мм
- Частота колебаний щетинок: 12 000–17 000 в мин.
- 2-минутный таймер
- 2 режима работы: ежедневный, для чувствительных зубов
- Питание: литий-ионный аккумулятор (350 mAh)
- Время полной зарядки: 4 ч.
- Время работы аккумулятора после полной зарядки: 30 дней
- Влагозащита: IPX7
- Размеры: 218,5×21×19 мм
- Размер чистящей поверхности: 18×8×8 мм
- Длина щетины: 11 мм
- Гарантия: 2 года
- Средний срок службы: 5 лет
- Хранить при комнатной температуре

Произведено по заказу ИП Обушенкова М.А.:
г. Елиста, ул. Джангара, д. 7.

Изготовитель: Dongguan Infly Life Technology Co., Ltd., Room 202, Building 1, No.36 Caixin Road, Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

По всем вопросам обращайтесь на горячую линию:

8 (800) 775-38-49 www.revyline.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Название организации _____

Место продажи _____

Место для печати _____